

Hygiëne & Onderhoud



van binnen
schoon, van
buiten
schoon

NIEUW



assistina 3X3

Assistina 3x3:

assistina 3X3

perfecte reiniging van de binnen- en buitenkant

De voordelen op een rijtje

- > Automatische reiniging van de binnenkant
- > Automatische reiniging van de buitenkant
- > Perfecte smering van de instrumenten
- > Korte cyclustijd
- > Eenvoudige bediening
- > Optimale prijs-kwaliteitsverhouding

Het totale proces*

1. Inwendige reiniging van de sprayleidingen en transmissieonderdelen, uitwendige reiniging van het instrument



2. Doorblazen van de sprayleidingen en transmissieonderdelen met perslucht



3. Smering van de transmissieonderdelen met W&H Service Oil F1



Assistina 3x3

3 instrumenten x 3 behandelingsstappen:
reiniging van de binnenkant, reiniging van de
buitenkant, smeren

Nooit meer instrumenten met de hand reinigen

Vanaf nu kunt u zich concentreren op datgene wat echt belangrijk is: uw patiënten. De Assistina 3x3 neemt automatisch de tijdrovende voorbereiding van hand- en hoekstukken en turbines op de sterilisatie op zich.



Reiniging van de binnenkant

De grondige reiniging van transmissieonderdelen en sprayleidingen verzekert de goede werking van de instrumenten.



Reiniging van de buitenkant

Het verwijderen van organische afzettingen voor de sterilisatie komt de veiligheid van uw patiënten en van de medewerkers van uw praktijk ten goede.



Perfecte olieverzorging

De nauwkeurige automatische smering van alle transmissieonderdelen verlengt de levensduur van uw instrumenten.




Recordtijd

De korte cyclustijd van ongeveer 6 minuten versnelt het totale reinigings- en onderhoudsproces.



Eenvoudige bediening

De werking van de Assistina 3x3 spreekt voor zich, de behandeling vindt plaats met een druk op de knop.

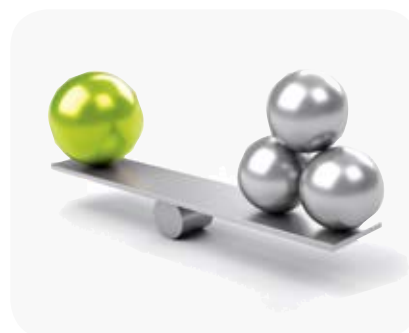


Prijs-kwaliteitsverhouding

Hoogste reinigingsrendement bij lage aanschafkosten en een uiterst zuinig verbruik.

Lisa autoclaaf met snelle cyclus als perfecte aanvulling op de Assistina 3x3



W&H biedt met de Lisa 500 sterilisatoren en de Assistina 3x3 vanaf nu de mogelijkheid tot snelle sterilisatie van onverpakte instrumenten.

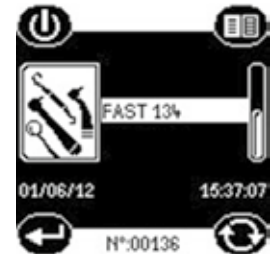

+



=



Reiniging van de binnen- en buitenkant

Het reinigingsproces van de Assistina 3x3 in combinatie met de snelle cyclus van Lisa verkort de totale behandelingstijd van de instrumenten.

Steriliseren in recordtijd

Aanvullend op de beproefde »klasse B-cycli« en de ECO B-functie is de Lisa autoclaaf ook met de snelle cyclus uitgerust.

Gereinigd, onderhouden, gesteriliseerd

Na slechts 20 minuten zijn de instrumenten weer beschikbaar.

Lisa «op-maat» sterilisatie cycli

Sterilisatiecycli		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121		Snelle cyclus	
Temperatuur		135,5 °C		135,5 °C		122,5 °C		135,5 °C	
Druk		2,16 bar		2,16 bar		1,16 bar		2,16 bar	
Sterilizatiefase		4'		18'		15'		3,5'	
		Cycli op maat + ECO-Dry drogen	Typische lading	Cycli op maat + ECO-Dry drogen	Typische lading	Leeg	Maximale lading	Warm start	Koud start
Totale cyclusduur inclusief volledige droging	Lisa 517	Automatisch van 20' tot 46'	33'	Automatisch van 34' tot 60'	47'	41'	56'	14'	16'
	Lisa 522	Automatisch van 23' tot 52'	33'	Automatisch van 37' tot 66'	47'	42'	62'	16'	18'

Max massieve lading: vol/typisch/Max poreuze lading

Lisa 517: 4,5kg/2kg/1,5kg • Lisa 522: 6kg/2kg/2kg

Testcycli

Helix, Bowie & Dick, vacuümtest

Wek de afbeelding tot leven:
hier en nu

Door W&H Augmented Reality (AR)
worden de echte wereld en de virtuele
wereld verenigd – uniek om mee te
maken. De toekomst begint vandaag!



De afbeelding kan meer dan je op het
eerste gezicht denkt: ze kan tot leven
worden gewekt!

Download de app »W&H AR« gratis op uw
smartphone of tablet-pc via Google Play
(voor Android) of via de Apple App Store.
Open de app en houd uw toestel 50 cm
boven de afbeelding!

Technische gegevens



QR-code scannen met de mobiele telefoon en meer te weten komen over Assistina

Afb. symboolfoto's. De extra uitrusting en de inhoud van de getoonde accessoires worden niet meegeleverd.



Assistina

3x3

Proces:	reiniging van de binnen- en buitenkant, olieverzorging
Geschikt voor:	hand- en hoekstukken, turbines, luchtmotoren en pneumatische tandsteenverwijderingsinstrumenten
Netspanning:	100 – 240 V
Max. opgenomen vermogen:	40 VA
Luchtverbruik:	ca. 100 NI/min.
Bedrijfsdruk:	5 – 10 bar (regeling door ingebouwde, automatische drukregelaar)
Hoogte / breedte / diepte:	358 x 207 x 397 mm
Vulhoeveelheid:	1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

Gedetailleerde informatie over de verschillende Assistina 3x3 / 3x2 adapters vindt u op wh.com



Gevalideerd proces

De validatie van het proces is bevestigd door een rapport en kan op wh.com worden geraadpleegd.



W&H Service Oil F1

De optimale olieverzorging voor transmissieonderdelen verlengt de levensduur van hand- en hoekstukken.



W&H Activefluid

Reinigingsoplossing voor een grondige reiniging van de binnen- en buitenkant van instrumenten.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com